



Rotation in Ihrem Ultraschallreinigungsgerät.

Siebreinigungs- modul SRH 4/200



Rotierende Siebreinigung

Schräg gestellt. Perfekt gereinigt.



Das SRH 4 / 200 zeigt, wie effizient und schonend Analysesiebe gereinigt werden können. In Kombination mit Ultraschall überzeugt es durch durchdachte Technik und sichtbare Ergebnisse.

Vorteile.

- : Gleichmäßige Reinigung von bis zu 4 Analysesieben (Ø bis 200/203 mm, 8") durch Ultraschall und permanente Rotation.
- : Zuverlässiger Reinigungs- und Spüleffekt durch schrägstellende Siebposition.
- : Wirtschaftlicher Vorteil durch werkzeuglose Ergänzung von vorhandenem Ultraschallreinigungsgerät (abhängig von der Wannengröße).

Produktinformation.

Bestellnummern

Siebreinigungsmodul	SRH 4 / 200
Bestellnummer 230V	1042706
Bestellnummer 115V	1044904


Mechanische Daten

Siebreinigungsmodul	Einheit	SRH 4 / 200
Max. Außenmaße B / T / H	mm	675 / 295 / 330
Gewicht	kg	6,8

Maximale Bestückung

Siebreinigungsmodul	SRH 4 / 200
Elmasonic P / Select / Easy 300	1 x
Elmasonic Select 500	1 x
Elmasonic Select 900	2 x

Maßdefinition

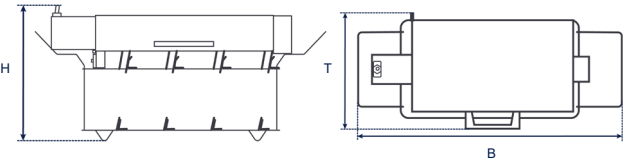



Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 17
78224 Singen (Germany)

www.elma-ultrasonic.com

