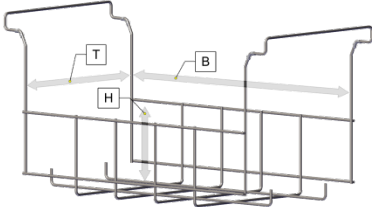
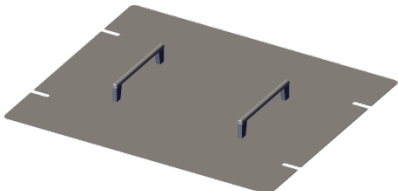


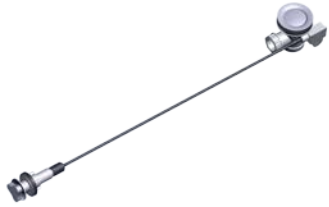
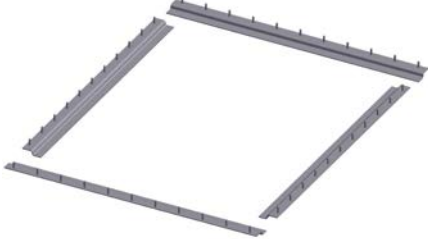
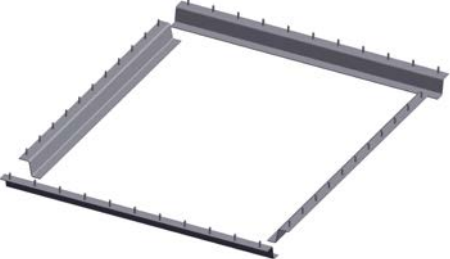

	Elmasonic EasyCARE TL	
	230 V~ Art.Nr.	108 4261
	Preis	3.750 €
<p>Beschreibung Elmasonic EasyCARE TL: Das Elmasonic EasyCARE TL ist ein leistungsstarkes Ultraschallgerät zur einfachen Integration in Vorreinigungsarbeitsplätze. Mit 37 kHz Ultraschallfrequenz, integrierter Pulse-Funktion für maximale Reinigungsleistung und einer zweistufigen Warnanzeige für Übertemperatur ist das Elmasonic EasyCARE TL bestens für den Einsatz in der Vorreinigung chirurgischer Instrumente ausgestattet. Im Lieferumfang ist ein Prüfzeugnis zur Gerätequalifizierung nach DIN SPEC 40170 enthalten. Damit ist die Requalifizierung des Gerätes und dessen Einbindung in die Prozessvalidierung möglich. Die professionelle Requalifizierung des Geräts erfolgt durch den Elma Service.</p>		

Produktmerkmale Elmasonic EasyCARE TL

- Maximale Ultraschallleistung durch integrierte Pulse-Funktion
- Warnanzeige bei Übertemperatur zur Vermeidung von Eiweißaushärtung
- Aufnahme von mehreren DIN- und ISO-Körben aufgrund der Wannentiefe von 30 cm
- Zwei Füllhöhenmarkierungen zur sicheren und sparsamen Dosierung der Reinigungsschemie
- Schräger Wannboden zum einfachen Entleeren und Wechseln der Reinigungsflüssigkeit
- Einfache Bedienung durch Anbringen des Bedienelements an der Arbeitsplattenfront
- Platzsparender und einfacher Einbau in Vorreinigungstische
- Wandhalterungen für den Deckel für einen freien und aufgeräumten Arbeitsbereich
- Hygienische Pflege durch abgerundete Wannenecken und einfach abwischbare Bedieneinheit
- Prüfzeugnis zur Gerätequalifizierung sowie optional regelmäßige Requalifizierung durch den Elma Service

Technische Daten:	
Elmasonic EasyCARE TL	
Mechanische Daten	
Wanne Arbeitsvolumen (L)*	30/50 *je nach Füllhöhe gemäß Markierung
Wanne Innenmaße B/T/H (ca. mm)	600x450x293
Material Wanne (Edelstahl)	1.4301
Ablauf (Zoll)	1 1/2
Korbträger Beladung max. (kg)	15
Gewicht	
Ultraschallwanne (kg)	15,5
Generator (kg)	8,5
Bedieneinheit (kg)	0,8
Deckel (kg)	2,3
Korbträger (kg)	1,2
Elektrische Daten	
Netzspannung (V~)	230
Ultraschall-Frequenz (kHz)	37
Ultraschall-Leistung effektiv (W)	600
Ultraschall Spitzenleistung max.* (W)	2400
Zeitschaltuhr (Minuten)	1-15 & Dauerbetrieb
Lärmpegel	
Schalldruck-Pegel (L_{pAU})**	<75 dB ** Gemessener Schalldruckpegel mit Korb und Deckel in 1m Entfernung
Ultraschall-Pegel (L_{pZ})**	<110 dB ** Gemessener Schalldruckpegel mit Korb und Deckel in 1m Entfernung

Zubehör:		
Elmasonic EasyCARE TL		
	Korbträger Nutzmaße (B/T/H mm): Art. Nr.	551x287x137 107 7734
	Preis	260 €
	Deckel (B/T/H mm): Art. Nr.	640x540x48 107 7689
	Preis	160 €
	Wandhalterung für Deckel 2x (dxl mm) Art. Nr.	5x80 108 3581
	Preis	37 €
	Ablaufgarnitur mit Zugknopf-Ablauffernbedienung (Zoll) Art. Nr.	1 ½ 107 7658
	Preis	230 €

	Ablaufgarnitur mit Drehknopf-Ablauffernbedienung (Zoll) Art. Nr.	1 ½ 108 7588
Preis		185 €
	Halterung V1 (Höhe Leiste mm) Art. Nr.	10,30 108 3768
Preis		116 €
	Halterung V2 (Höhe Leiste mm) Art. Nr.	31,10 108 3769
Preis		110 €
	Edelstahl Ablaufstöpsel Art. Nr.	108 3661
Preis		31 €

Alle Preise ab Werk, ausschließlich Außenverpackung, zzgl. MwSt.
Technische und optische Änderungen vorbehalten 05/2017